



La sécurité optimale

Flacon Prérempli de Formol 10% tamponné avec une technologie innovante sans aucune émission de vapeurs de formol



CE IVD
Patent Pending
Made in Italy

Conforme à la nouvelle classification du formol UE-N605/2014



Flacons ZERO™

Flacons préremplis de formol 10% Tamponné sans aucun contact avec le formol
--

Spécialiste de la gestion du risque formol depuis plusieurs années, la société **TECH INTER** propose les flacons **ZERO™** préremplis de formol 10% tamponné.

Les flacons **ZERO™**, conçus et développés par notre partenaire italien **MGM**, bénéficient d'une technologie totalement innovante pour permettre aux utilisateurs des blocs opératoires d'être totalement protégés des vapeurs de formol mais également pour faciliter l'introduction et la récupération des échantillons.

Les flacons ZERO™ ont été conçus pour offrir une utilisation simple et une sécurité optimale.

Avec ces flacons, totalement sécurisés, l'opérateur du bloc opératoire, n'est plus en contact avec le formol. Le formol est contenu dans une chambre hermétique étanche. L'utilisateur dévisse le bouchon, dépose l'échantillon dans le compartiment de transfert, en utilisant éventuellement la pointe située à l'intérieur pour détacher la biopsie ou en l'agitant dans le tampon neutre (version A). Il revisse le bouchon complètement pour faire descendre le compartiment mobile dans la chambre contenant le formol.

Pour faciliter la dépose des biopsies dans le flacon ZERO 60, une pointe a été intégrée afin de la détacher aisément.

Le flacon ZERO 500P a été conçu pour recevoir de plus gros échantillons ou jusqu'à 12 cassettes verticalement. Idéal pour les biopsies prostatiques

Les flacons ZERO™ sont disponibles en 3 tailles avec bouchon proposés dans 8 couleurs :

- | | |
|------------------|--|
| ZERO60 (A* ou B) | Flacon de 60 ml prérempli avec 20 ml de formol |
| ZERO150C | Flacon de 150 ml prérempli avec 60 ml de formol |
| ZERO500(D ou P) | Flacon de 550 ml prérempli avec 230 ml de formol (P pour prostate) |

Avantages

ZERO contact avec le formol pour l'opérateur

ZERO émission de vapeur de formol

Simplicité d'utilisation

ZERO 60 B



Compartiment mobile pour déposer la biopsie


Bague de sécurité. Permet de blocage du bouchon sur le flacon. Une fois fermée, une éventuelle ouverture du flacon lors du transfert au laboratoire serait détectée par la rupture de cette bague

Pointe pour détacher la biopsie

Compartiment étanche contenant le formol 10% tamponné

ZERO 150 C

*La version A est livrée avec une solution de tampon neutre dans le compartiment mobile pour faciliter le dépôt de la biopsie.

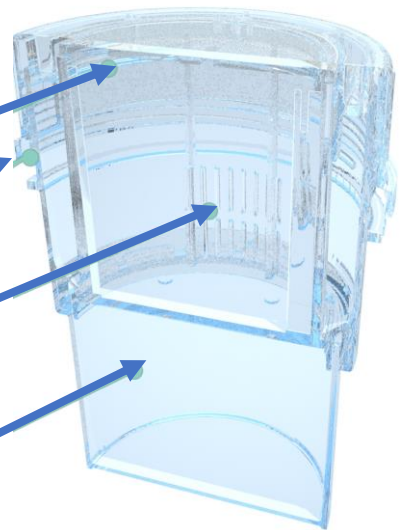


Couvercle pour fermer le compartiment mobile

Bague de sécurité

Compartiment mobile pour déposer l'échantillon ou 3 cassettes

Compartiment étanche contenant le formol 10% tamponné

ZERO 500 P

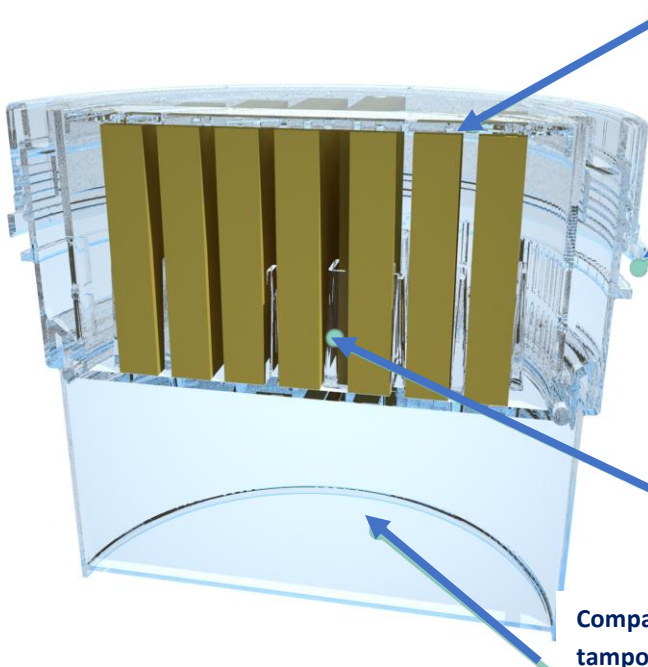

Compartiment mobile pour déposer la biopsie



Bague de sécurité

Compartiment mobile pour déposer l'échantillon ou 12 cassettes

Compartiment étanche contenant le formol 10% tamponné

Références pour commander

Description	CODE	DESCRIPTIF	Volume du flacon	Volume de formol	COND.
ZERO 60 A	060011	FORMOL 10% Tamponné avec tampon neutre	60 ml	20 ml de formol et 10 ml de tampon neutre	48 pcs
ZERO 60 B	06001	FORMOL 10% tamponné Bouchon transparent	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 60 B	06002	FORMOL 10% tamponné Bouchon orange	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 60 B	06003	FORMOL 10% tamponné Bouchon bleu	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 60 B	06004	FORMOL 10% tamponné Bouchon jaune	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 60 B	06005	FORMOL 10% tamponné Bouchon rose	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 60 B	06006	FORMOL 10% tamponné Bouchon vert	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 60 B	06007	FORMOL 10% tamponné Bouchon gris	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 60 B	06008	FORMOL 10% tamponné Bouchon lilas	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 150 C	15001	FORMOL 10% tamponné Bouchon transparent	60 ml	20 ml de formol	48 pcs
ZERO 150 C	15002	FORMOL 10% tamponné Bouchon orange	150 ML	60 ml de formol	24 pcs
ZERO 150 C	15003	FORMOL 10% tamponné Bouchon bleu	150 ML	60 ml de formol	24 pcs
ZERO 150 C	15004	FORMOL 10% tamponné Bouchon jaune	150 ML	60 ml de formol	24 pcs
ZERO 150 C	15005	FORMOL 10% tamponné Bouchon rose	150 ML	60 ml de formol	24 pcs
ZERO 150 C	15006	FORMOL 10% tamponné Bouchon vert	150 ML	60 ml de formol	24 pcs
ZERO 150 C	15007	FORMOL 10% tamponné Bouchon gris	150 ML	60 ml de formol	24 pcs
ZERO 150 C	15008	FORMOL 10% tamponné Bouchon lilas	150 ML	60 ml de formol	24 pcs
ZERO 500 D	50001	FORMOL 10% tamponné Bouchon transparent	550 ml	230 ml de formol	NC
ZERO 500 P	50002	FORMOL 10% tamponné Bouchon transparent	550 ml	230 ml de formol	NC

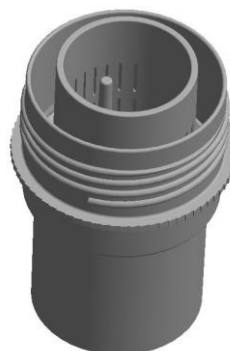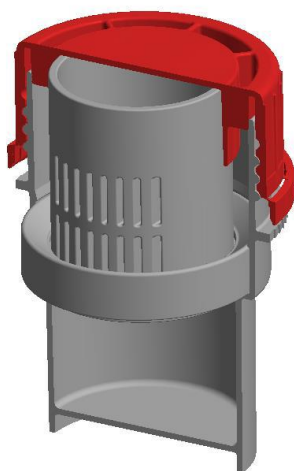

TECH INTER. ZA du clos de Villarceaux. 78770 THOIRY.

Tel : 01 34 94 20 40. Fax : 01 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr site : www.tech-inter.fr